

NuAire 大容量台式离心机介绍- 台离中的优选品牌!

目前，很多不同应用的实验室，包括临床检验，分子生物实验室，理化实验室等各种常规样品的离心，都会选购一台台式离心机，并且多数情况下要求水平转头容量大，一次离心离心管数量多，角转头有多种可选。针对这种情况，现推荐给大家台离中的优选品牌-NuAire 离心机。

NuAire 离心机是美国知名品牌，具有多种优异的性能，详见如下介绍：

1. **主机：**主机型号包括常温型和制冷型，见下图：



常温型 NU-C200V




制冷型 NU-C200R

最高转速：NU-C200R 可达 18000rpm，NU-C200V 可达 15300rpm

最大离心力：高达 30980×g (NU-C200R)，22380×g (NU-C200V)

最大容量可达：4 x 625ml


2. **大容量：**很多情况下，用户需要使用大容量的水平转头，而 NuWind 离心机的大容量水平转头可高达 4x625ml 的容量，且其转速和离心力可以达到 5100rpm 和 5350xg, 绝对是同类机型中的佼佼者，无可比拟。在如此高的转速下，依然可做到对一次进行最多数量的离心管或酶标板离心，详见下图，

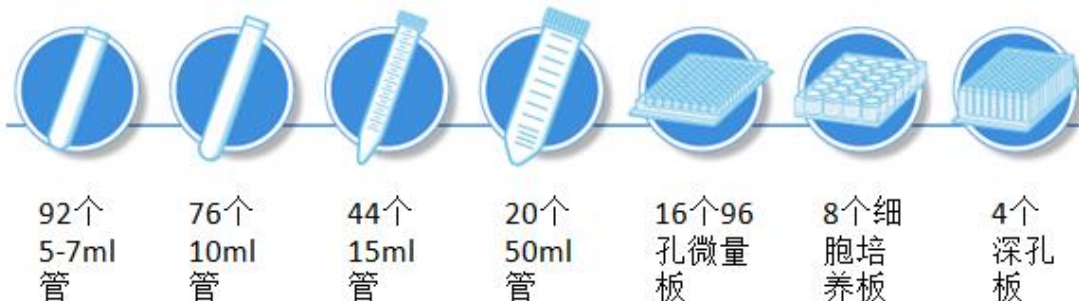

3. **转头自锁及轻松拆卸：**离心机的转头安装和拆卸都是很多实验室老师和学生头痛的事情，常常需要工具来进行固定或拆卸转头，麻烦且容易出现问題。NuWind 离心机具有 Click-Spin 专利技术，使得更换转头变的轻松简便和快速；无需任何工具拆卸！

天美(中国)科学仪器有限公司
北京市朝阳区天畅园7号楼(100107)

t 010-64010651
f 010-64060202
e techcomp@techcomp.cn
w www.techcomp.cn

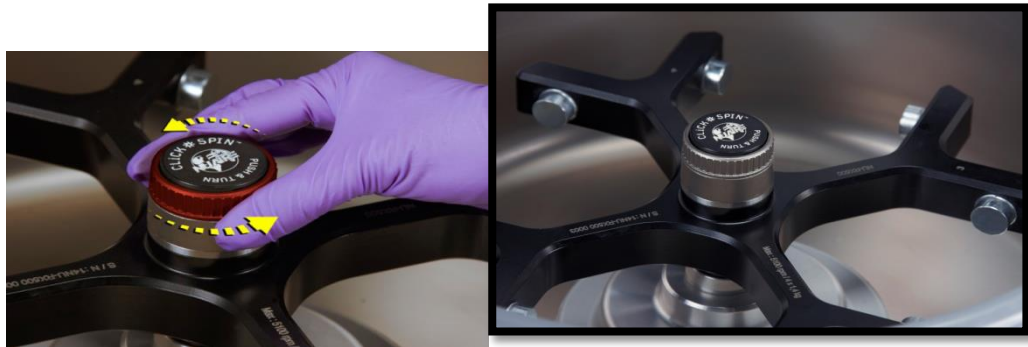

只需将转头放置在转轴上，就可以完美自锁。一旦安放完好，即可听到“Click”声，确保转头安装完好。拆卸转头时，只需将转头上的红色旋钮进行反时针旋转，当听到“Click”声，转头即从转轴上被解锁，然后即可轻松的移开转头并安装别的转头。

4. **安全性高**：对于台式离心机，安全性能是用户放心离心的重要考虑，NU-C200V/C200R 离心机具有如下安全保障，保证了离心过程中的安全及放心使用：



强有力的不平衡保护

13mm 厚的防护钢

门盖自动锁定功

5. **操作简便**：下图是 NU-C200V/C200R 部分转头离心示意图：



6. **多种角转头可选**：NU-C200V/C200R 离心机还有多种其它角转头可选，甚至具有 5ml x 16 的角转头，用于满足用户的不同应用的离心需要。



所以，NuAire 的 NU-C200V/C200R 台式离心机绝对是台离中的优选品牌，可以满足广大用户的不同离心的需要。如欲了解更多详细信息，请随时访问天美网站或联系我们。